

Transportkoffer

Voor mobiel gebruik is een passende transportkoffer apart verkrijgbaar.



Insteeklijsten

Met de optioneel verkrijgbare inzetstukken kunnen zowel bijziendheid en nachtbijziendheid als verziendheid en ouderdomsverziendheid worden vastgesteld.



B L O
C K O
P T I
C :

TECHNISCHE DETAILS

- Testafstanden: 33 cm, 40 cm, 57 cm, 1 m, oneindig
- Testveldgrootte: 5°
- Testveldhelderheid fotopisch: ca. 120 cd/m
- Testveldhelderheid mesopisch zonder verblinding: 0,032 cd/m
- Testveldhelderheid mesopisch met verblinding: 0,1 cd/m
- Verblindingsverlichtingssterkte: 0,35 lx
- Breedte, hoogte, diepte: ca. 330 x 265 x 460 mm
- Gewicht: ca. 7 kg
- Nominale ingangsspanning: 230 V, 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen: 25 VA
- Beschermingsvereiste: EMVG / DIN EN 60601-1
- Beschermingsklasse: MDR klasse 1

Technische wijzigingen voorbehouden 02 / 26

Block Optic Design GmbH ■ Semerteichstraße 60 ■ D-44141 Dortmund/Germany
Fon: +49 (0) 231 1087785-0 ■ Fax: +49 (0) 231 1763065
E-Mail: info@block-optic.com ■ Internet: www.block-optic.com


Block Optic is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001:2015.



BINOPHOR®

Beschrijving

In een uiterst gespecialiseerde wereld is een goed gezichtsvermogen vaak een noodzakelijke voorwaarde in veel beroepsgroepen. Zo regelen inmiddels talrijke normen en wettelijke voorschriften de minimumvereisten die aan het gezichtsvermogen in de betreffende sectoren worden gesteld. Deze worden getoetst door een grote groep gebruikers met verschillende specialismen, zoals oogartsen, bedrijfsartsen of arbeidsgeneeskundigen.

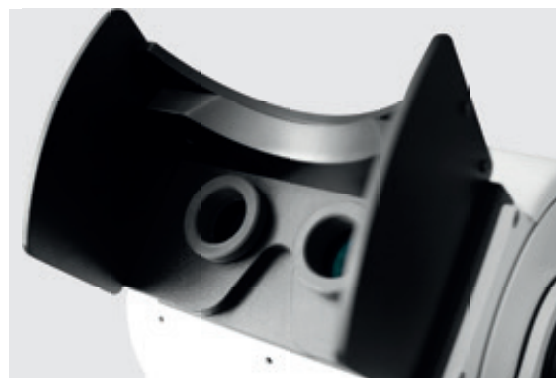

Inzicht



Instelwiel
Controleafstand



De bediening gebeurt via een tablet met behulp van de app "BinophorControl".



EIGENSCHAPPEN


De Binophor® biedt kant-en-klare testprogramma's voor de volgende voorschriften en beroepsverenigingsprincipes:

- DIN 58220-deel 5 – Algemene oogtest
- DIN 58220 deel 6 – Oogtest voor het wegverkeer
- DIN 58220-deel 7 – Mesopisch contrastzicht met en zonder verblinding
- G25 – Rij-, stuur- en bewakingstaken
- G37 – Bildschirmarbeitsplätze
- JAR-FCL3 – Piloten klasse 2
- Algemene gezichtstest (optioneel)

>> Aanbeveling van de DOG-commissie



De volgende oogtesten en tests zijn opgenomen:

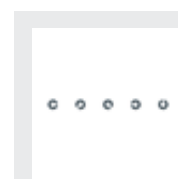


Landoltringen volgens ISO 8596
Visusniveaus: 0,2, 0,32, 0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 1,0

met en zonder verblinding



Landoltringen volgens ISO 8596
Contrastniveaus: 23:1, 5:1, 2,7:1, 2:1

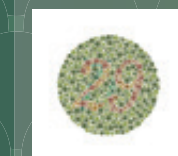

Kleurenwaarnemingstest volgens Ishihara



Phorietest horizontaal en verticaal



Stereotest met gezichtshoek 100°



Stereotest met gezichtshoek 800°, 600°, 400°, 200°, 100°, 50°

Weitere Eigenschaften und Optionen des Binophor®:

- Inzichthoek traploos instelbaar
- Afneembare verblindingsbescherming
- Tabletbediening
- Hygiënisch oppervlak
- Mobiel inzetbaar
- Nachtmyopieonderzoek (optioneel)
Inschuifbare balk met -0,5, -1,0, -1,5 dpt
- Hyperopieonderzoek (optioneel)
Inschuifbare balk met +0,5, +1,0, +1,5 dpt