


# Testprogramme Test programs

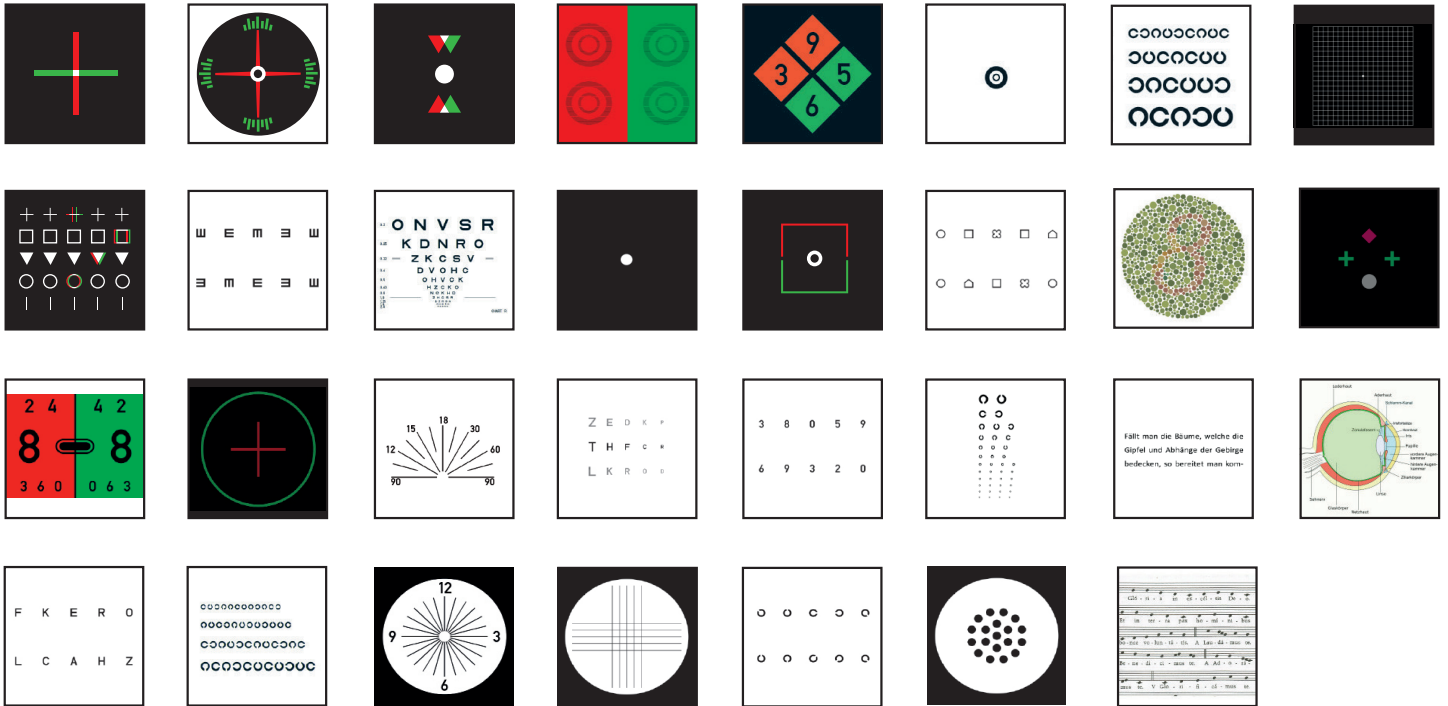

**Prüfentfernungen / Testing distance:**  
 3- 7 m

**Visusstufen / Acuity steps:**  
 0,05- 2,0, logarithmisch, dezimal oder individuell

**Sichtbare Fläche / Viewing area:**  
 ca. 527 x 296 mm

**Stromversorgung / Main voltage:**  
 230 V, 50 Hz

**Maße (inkl. Wandhalterung) / Dimensions (incl. wall mount):**  
 ca. 628 x 398 x 45 mm

**Gewicht / Weight:**  
 ca. 6,2 kg

Technische Änderungen vorbehalten / Technical modifications reserved 01/2025


technical data

**TECHNISCHE DATEN**

Block Optic ist zertifiziert gemäß  
 DIN ISO 9001



B L O  
C K O  
P T I  
C :

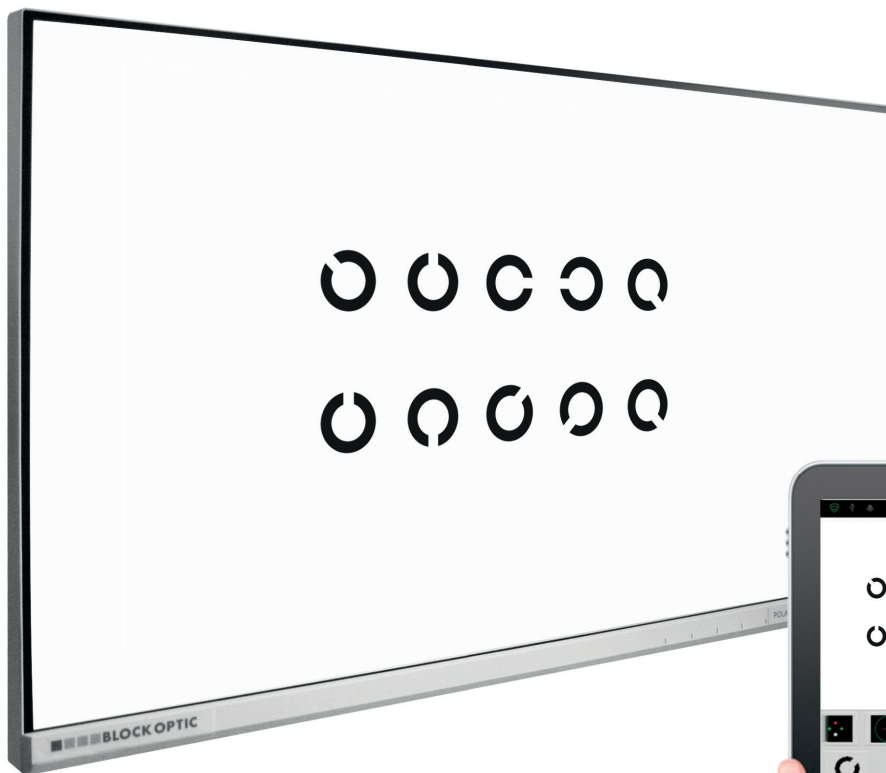


# POLAPHOR® SCREEN

## Beschreibung Description

Der Polaphor® Screen, ein innovatives Sehtestgerät, bietet eine Vielzahl von Tests für die Fernrefraktion. Die Bedienung erfolgt über ein separates Tablet.

The Polaphor® Screen, an innovative vision testing device, offers a variety of tests for distance refraction. It is operated via a special tablet.

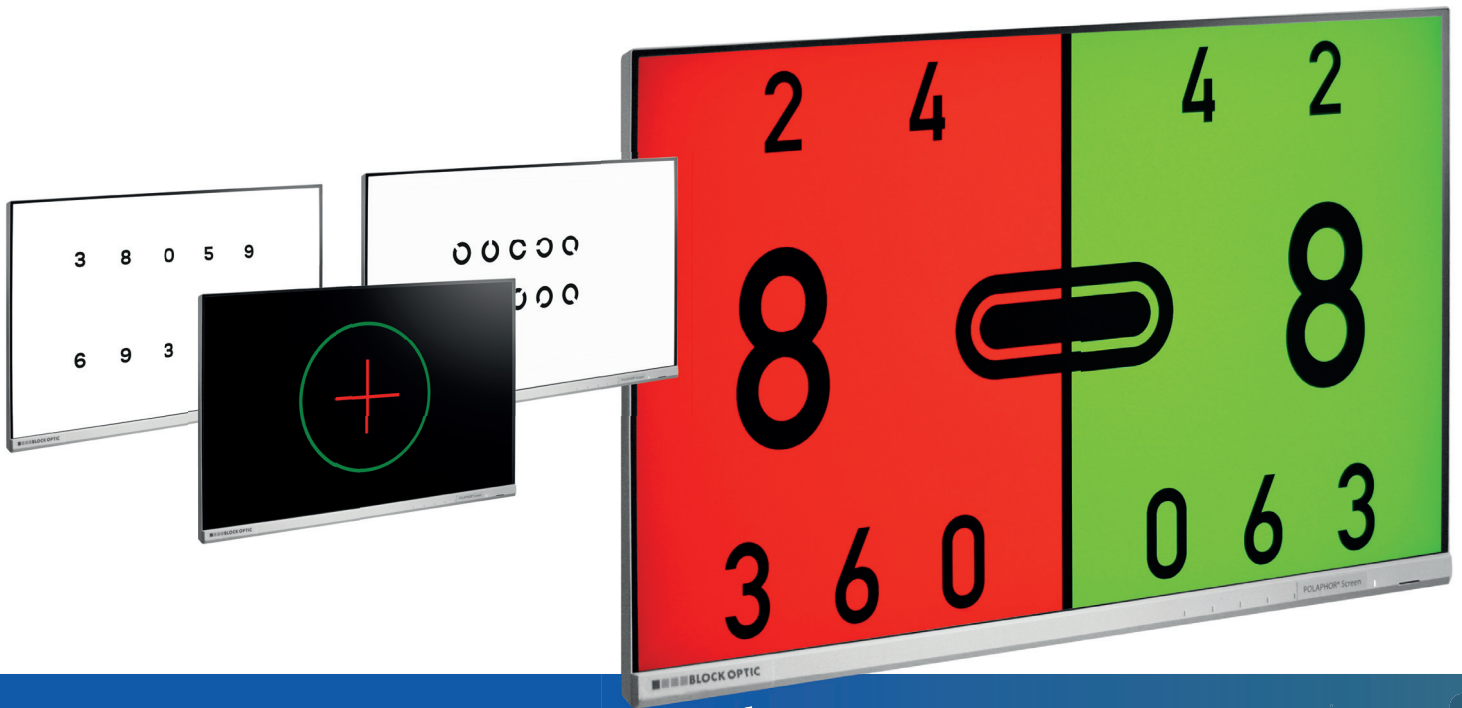

Anbindung an ausgewählte elektrische Phoroptoren optional möglich  
Nidek, Topcon, Visutron, etc.

Connection to selected electrical Phoroptors optionally possible  
Nidek, Topcon, Visutron, etc.

Sämtliche Sehzeichen in den Visusstufen 0,05 bis 2,0 logarithmisch, dezimal oder individuell in Abstufungen darstellbar.

All visual acuity levels from 0.05 to 2.0 can be displayed logarithmically, decimally or individually in gradations.

Große Auswahl an monokularen und binokularen Sondertests.

Large amount of monocular and binocular tests.

für unsere Produktvideos und weitere Informationen scannen Sie gerne den QR-Code

for our product videos and further information please scan the QR code



# EIGENSCHAFTEN

## Properties

Der Polaphor® Screen bietet folgende Testprogramme:

- Einzel-, Reihen- und Gruppendarstellung
- Spiegelablesung der Sehzeichen
- Rot, Grün- Abgleich
- Zufallsgenerator zuschaltbar
- Mehrsprachige Menüführung
- Lautloser Betrieb und schneller Prüffeldwechsel
- Viele optionale Erweiterungen erhältlich
- Steuerung mittels Bedientablet und der App „PhorControl“
- Visuelles Feedback der dargestellten Sehzeichen
- Anbindung an ausgewählte elektrische Phoroptoren optional möglich  
Nidek, Topcon, Visutron, etc.

The Polaphor® Screen offers the following test programs:

- individual, series and group display
- mirror reading of the visual symbols
- red, green adjustment
- random generator can be switched on
- multilingual menu navigation
- silent operation and quick test field change
- many optional extensions available
- control via control tablet and the “PhorControl” app
- visual feedback of the displayed visual symbols
- Connection to selected electrical Phoroptors optionally possible  
Nidek, Topcon, Visotron, etc.



inkl. Wandhalterung  
incl. Wall mount

Die Bedienung erfolgt über ein separates Tablet mittels der App „**PhorControl**“.

Operation takes place via a separate tablet using the app **“PhorControl”** app.